
FICHE D'ENTRETIEN

Instruments rotatifs

Easy SAV

VTD
Matériel pédicurie podologie

1. INSTRUMENTS CONCERNÉS

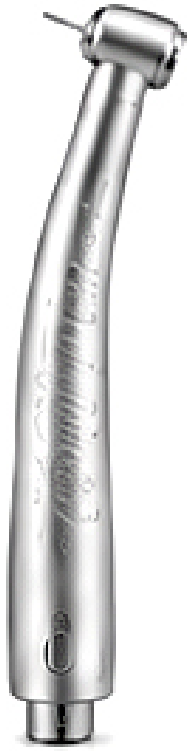

Turbine




Moteur



Pièce à main droite

ne pas lubrifier

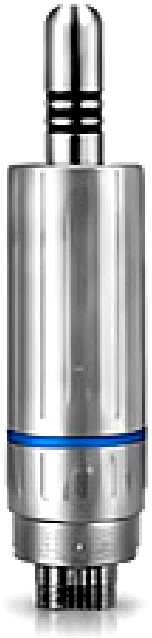

Moteur élec. brushless

2. FRÉQUENCE DE LUBRIFICATION

- **Minimum 1 fois par jour**
- **Plus souvent en cas d'utilisation intensive**
- **Après nettoyage ou désinfection interne**
- **Avant stérilisation, si l'instrument est autoclavable**





Stériliser
(si l'instrument est autoclavable)

3. PROCÉDURE CONSEILLÉE



① **Retirer la fraise ou l'outil**



② **Appliquer une petite quantité d'huile dans le plus petit des 2 gros trous du raccord 4 voies** (ou avec l'embout d'entretien adapté)



③ **Reconnecter l'instrument**



④ **Faire tourner le rotatif quelques secondes, tête vers le bas**



⑤ **Essuyer l'excédent d'huile**



⑥ **Stériliser** (si l'instrument est autoclavable)

4. IMPORTANT NE PAS SURCHARGER EN HUILE

Un excès d'huile peut provoquer des dysfonctionnements, des projections d'huile et une migration du lubrifiant vers d'autres composants.

Toujours faire tourner les rotatifs tête vers le bas après lubrification afin d'évacuer le surplus.

Cette précaution est particulièrement importante lorsque la pièce à main est utilisée avec un moteur électrique, afin d'éviter que l'excédent d'huile ne redescende dans le moteur.



TOUJOURS TÊTE VERS LE BAS

5. RECOMMANDATIONS

- ✓ Utiliser exclusivement une huile ou un spray pour instruments rotatifs dentaires.
- ✓ Respecter les préconisations spécifiques du fabricant.
- ✓ Le moteur électrique brushless ne doit pas être lubrifié.
- ✓ En cas de bruit anormal, de vibration ou d'échauffement, arrêter l'instrument et le faire contrôler.

07 82 46 53 19
@ vtdhalbot@gmail.com
© VTD SAS
www.vtd-pedicurie-podologie.fr